


# TEST GRAVIDANZA

www.testdiagnostici.it

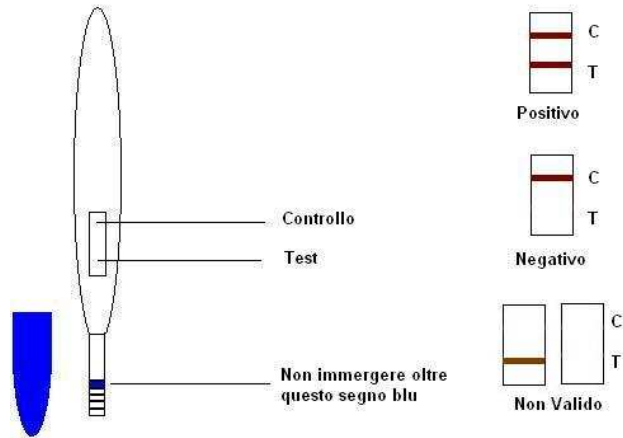

Questi test contengono una striscia reattiva che a contatto con l'urina cambia colore indicando o meno lo stato di gravidanza.

Lo stick di plastica è dotato di una finestrella dove devono comparire due strisce colorate: una di controllo ( C ), si colora se il test è stato eseguito in maniera corretta, l'altra è quella del test ( T ) e indica, se si colora, la positività del test, quindi confermando la gravidanza

- 1) Effettuare il test con l'urina del mattino, contiene la massima concentrazione di ormone ( si può fare comunque in qualsiasi momento della giornata);
- 2) Raccogliere una piccola quantità di urina in un contenitore pulito ed immergere la punta dello stick **non oltre la linea azzurra**, lasciarla immersa per 5-20 secondi e toglierla dal contenitore.
- 3) Adagiarla su un piano orizzontale ed attendere 2-5 minuti per verificare il risultato.

A) **gravidanza è in corso POSITIVO**, nella finestrella dello stick compaiono due linee in corrispondenza della zona di controllo C e della zona test T .**A volte la linea in corrispondenza della zona T si colora debolmente** il che sta ad indicare che la positività non è sicura, in questi casi, come anche nel caso della sicura positività o negatività, è consigliabile ripetere l'esame a distanza di un paio di giorni utilizzando un altro stick.

B) **gravidanza non è in corso NEGATIVO**, compare solo una linea in corrispondenza della zona di controllo C.

#### Falso negativo:

- la donna ha un ciclo mestruale più lungo della norma (30-35 giorni), molto irregolare, o l'ovulazione risulta spostata verso la fine del ciclo, invece che intorno al 14° giorno. Ciò, infatti, determina anche lo slittamento in avanti dell'avvio di produzione di Hcg.
- L'esame viene effettuato troppo presto (cioè prima di 6-7 giorni dalla data del mancato ciclo), per cui il tasso di Hcg nell'urina non è sufficientemente alto per essere rilevato (il livello minimo corrisponde a 25 mIU/ml).

#### Falso positivo:

- si è verificato da poco un aborto spontaneo;
- l'esame viene eseguito nelle otto settimane successive ad un parto, nel momento in cui si ha il dubbio di essere di nuovo incinta;
- la donna è in menopausa;
- sono presenti disturbi quali cisti ovariche, malattie dell'apparato riproduttivo o infezioni; la donna sta assumendo farmaci contro l'infertilità.

**ATTENZIONE: Gli stick vanno conservati ad una temperatura tra i 5 - 30°C (non in frigo)**

www.testdiagnostici.it



**D.o.A.**  
**Drugs of Abuse**

**Tel. +39 340.12.47.433**  
Dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 16  
**E-mail: info@testdiagnostici.it**